


L'emboiture n'est plus aussi confortable qu'avant ? Que faire ?

- L'emboiture était bien adaptée à la sortie du centre et pendant quelques semaines. Maintenant elle ne va plus. L'emboiture n'a pas changée. Le moignon surement.

Étape 1. Tester le côté technique

Si système de valve

Il y a peut-être de la poussière dans la valve
Souffler dans le trou de la valve

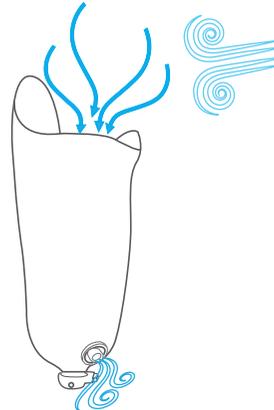

Si accroche distale

1




Le plongeur est-il bien vissé au manchon ?

✓ Oui : continuer

✗ Non : le revisser

2

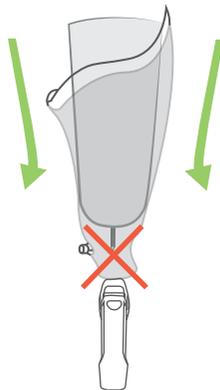

Retirer le manchon du moignon et rentrer le manchon avec la main dans l'emboiture.

3

Le manchon va-t-il tout au fond de l'emboiture ?

✓ Oui : voir l'étape 2

✗ Non : Regarder s'il ya un corps étranger dans l'emboiture ?

Si système de cordelette



Vérifier qu'il n'y est pas de noeuds sur la corde


➡ Si tous ces éléments sont bons, alors le côté technique est ok.

Étape 2. Le moignon a peut-être grossi ou maigri

2.1 Le moignon a peut-être grossi

Symptômes

- Je me sens serré dans l'emboiture
- Je rentre difficilement dans l'emboiture
- Je me sens trop haut

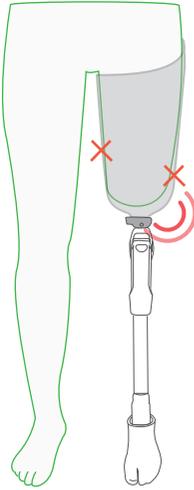

Que faire ?


Mettre le bonnet elastocompressif la nuit

Essayer de nouveau la prothèse.

Je me sens mieux ?


✓ Oui : je continue de porter le bonnet la nuit

✗ Non : j'appelle OPR

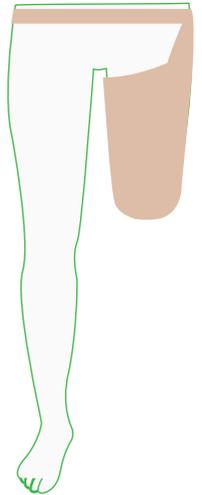

2.2 Le moignon a peut-être maigri

Symptômes

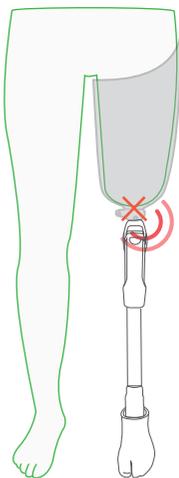

- Je sens que je tape au fond de l'emboiture
- Je sens ma prothèse trop basse
- J'ai des douleurs au bout du moignon
- Je blesse
- Mon moignon est froid
- Je rentre facilement dans ma prothèse

Que faire ?

Gérer le volume avec des bonnets au dessus du manchon


Dans le cas d'un manchon avec collerette

Mettre un bonnet et le glisser sous la collerette :

C'est mieux ?

✓ Oui : je le garde

✗ Non : appeler OPR

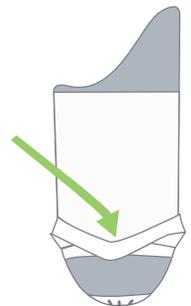


Dans le cas d'un manchon avec plongeur ou attache distal :

Mettre un bonnet sur le manchon

C'est mieux ?

✓ Oui : je le garde

✗ Non : appeler OPR

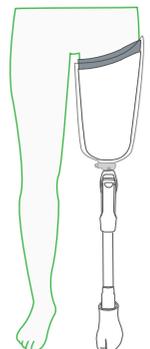

Si aucune de ces solutions ne fonctionne,
N'hésitez pas à nous contacter

☎ 02 23 20 00 44

✉ info@opr35.com